

PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT (PPE) REQUIREMENTS




- 1 N95 respirator or Powered Air Purifying Respirator (PAPR)
- 2 Eye protection (goggles or face shield)
- 3 Gloves
- 4 Gown

For healthcare personnel collecting specimens or others within 2 meters of patient.

NASOPHARYNGEAL BIOSPECIMEN COLLECTION

- 1 **Position:** Tilt patient's head back 70°.
- 2 **Probe:** Test septum permeability, use same swab.
- 3 **Insert:** Gently insert swab parallel to the palate.
- 4 **Depth:** Advance swab 2 to 3 inches until nasopharynx.
- 5 **Swab:** Roll swab 4 times.
- 6 **Remove:** Slowly withdraw swab while rotating it.
- 7 **Store:** Place swab tip-first into the provided tube with media.
- 8 **Transport:** Place tube in bag, and bag inside refrigerated box.
- 9 **Referral:** Deliver specimen to our lab within 4 hours.

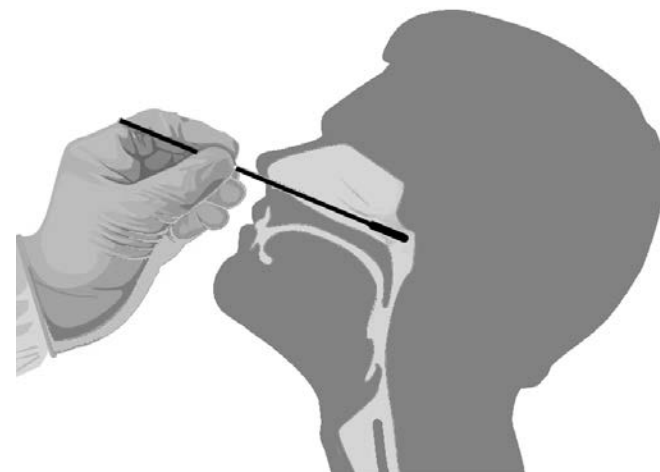

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) REQUERIDO



- 1 Respirador N95 o respirador purificador de aire motorizado (PAPR).
- 2 Protección para los ojos (goggles o Careta facial)
- 3 Guantes
- 4 Bata

Para personal médico recabando muestras u otras personas a menos de 2 metros del paciente.

RECOLECCIÓN DE MUESTRAS NASOFARÍNGEAS

- 1 **Posición:** Inclinar la cabeza del paciente hacia atrás 70°.
- 2 **Sondeo:** Pruebe la narina mas permeable, utilice mismo hisopo.
- 3 **Inserción:** Genitlmente inserte hisopo paralelo al piso del paladar.
- 4 **Profundidad:** Introduzca hisopo 2 a 3 pulgadas hasta nasofaringe.
- 5 **Hisopado:** Gire el hisopo 4 veces.
- 6 **Retiro:** Lentamente retire el hisopo mientras se gira.
- 7 **Almacenamiento:** Coloque hisopo doblado en tubo con medio de transporte.
- 8 **Transporte:** Coloque tubo con medio en bolsa tipo Zip-Lok y la bolsa en la caja refrigerada.
- 9 **Referencia:** Refiera muestra a nuestro laboratorio dentro de las primeras 4 horas.

